



Catalogue de produits
RADIOFRÉQUENCE
ENDYMED™ | 3DEEP

 **TechniLase**
votre partenaire laser
distributeur de **ENDYMED™** |

ENDYMEDTM
3DEEP SKIN SCIENCE

EndyMed Medical

EndyMed Medical est une société créée en 2007 qui développe et commercialise des appareils médicaux de radiofréquence (RF) à destination des médecins.

La technologie 3DEEP est une solution hautement efficace qui offre des traitements fractionnés non ablatifs pour le relâchement cutané, le remodelage du visage, du cou et du corps mais aussi pour le traitement des cicatrices d'acné et des vergetures grâce à la RF micro-aiguilles.

Unique et brevetée 3DEEP d'EndyMed offre une énergie RF volumétrique sur 3 niveaux dans le derme profond tout en minimisant l'effet thermique épidermique. Ce traitement sans aucune douleur ou risque stimule la production naturelle de collagène pour éliminer les rides et visiblement lifter et raffermir la peau.

Avec 6 générateurs RF, 3DEEP est la technologie la plus avancée et innovante disponible aujourd'hui. Elle est parfaitement sécurisée et adaptée à tous les types et couleurs de peaux.

3DEEP® - Technologie basée sur la science

3DEEP® a reçu l'agrément CE Médicale et FDA.

3DEEP® est une technologie RF multi-sources innovante. Un algorithme sophistiqué manipule la phase de courant circulant entre chaque paire d'électrodes. Les champs électriques multiples créés se repoussent, conduisant à une combinaison d'énergie idéale dirigée vers une couche de peau plus profonde. Les forces de répulsion entre les champs électromagnétiques adjacents entraînent l'énergie verticalement dans le tissu cible, réduisant la quantité d'énergie qui s'écoule à travers la surface de la peau et atténuant le besoin de refroidissement.

ENDYMEDTM
3DEEP SKIN SCIENCE

APPROUVÉ
FDA CE

Comparaison des profils thermiques de la RF 3DEEP versus une RF Bipolaire classique :

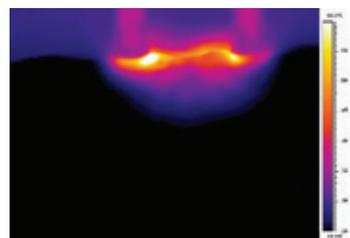


Image thermique bipolaire.



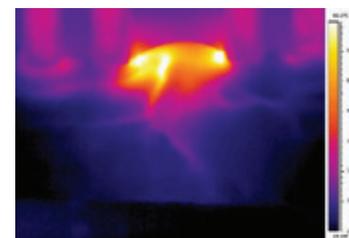



Image Thermique 3DEEP. Remarquez la différence de profondeur de pénétration pour une même énergie appliquée au tissu entre la RF 3DEEP et la RF Bipolaire. (Utilisation d'une caméra thermique FLIR ThermoCAM SC 640).

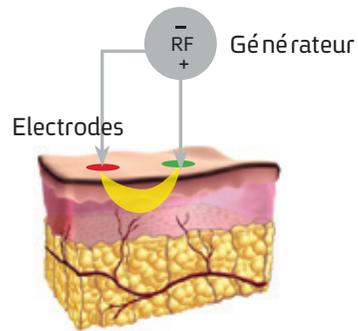

A Energie RF bipolaire - circule entre les 2 électrodes de façon relativement superficielle et peu efficace

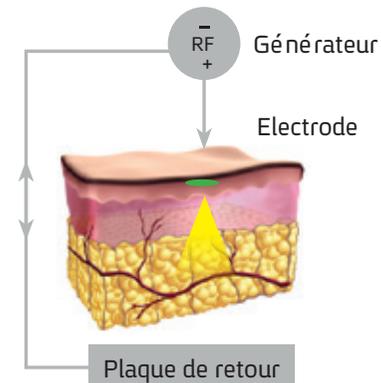

B Energie RF Monopolaire - circule de manière non contrôlée dans les tissus et exige un refroidissement cutané

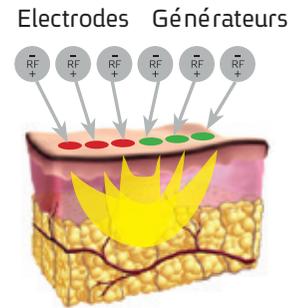

C Energie 3DEEP RF - circulation d'énergie focalisée en profondeur sans besoins de refroidissement cutané

3DEEP®


Energie RF focalisée et profonde

3DEEP® - Resurfaçage Fractionné de la peau

Pour traiter l'élastose induite par le vieillissement cutané, l'ablation des couches supérieures de l'épiderme peut être nécessaire. La technologie d'ablation fractionnelle 3DEEP® FSR d'EndyMed utilise 112 électrodes pour générer une micro-ablation fractionnée de l'épiderme.

En outre, pour un effet de remodelage induit à long terme, le derme est traité simultanément avec un profond chauffage non ablatif, qui conduit à réduire les rides et les cicatrices.

La technologie de Resurfaçage de la peau fractionnée 3DEEP Endymed, effectue une ablation fractionnée de l'épiderme et génère une chauffe volumétrique dans le derme profond, le tout en une seule impulsion.

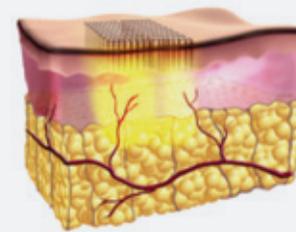

Le resurfaçage fractionné 3DEEP permet de traiter simultanément l'épiderme et le derme pour une résultat optimal. Le teint est plus uniforme et la peau plus douce. Le chauffage volumétrique en profondeur génère une contraction des fibre de collagène pour un effet immédiat de longue durée.

Remodelage corporel / Amélioration de la texture / Réduction de la cellulite / Resurfaçage fractionnel / Raffermissment de la peau / Réduction des rides / Traitement de l'acné et des cicatrices d'acné / Révision des cicatrices / Réduction des rides.

ENDYMED™ | PRO

L'EndyMed PRO offre une solution exceptionnellement efficace, cohérente et souple, fusion de l'innovation technologique et de la flexibilité exigée par les utilisateurs.

Avec un design élégant l'EndyMed PRO est conçu, comme une plateforme de traitement multi-applications pouvant recevoir toutes les pièces à main de traitement EndyMed.

L'Endymed PRO intègre avec 3DEEP la technologie RF la plus avancée et celle qui bénéficie du plus grand recul clinique. Désormais avec une puissance de 85W, la plateforme Endymed PRO est la technologie de traitement RF focalisée la plus puissante du marché à ce jour.

Au lieu d'utiliser des technologies RF Monopolaire ou Bipolaires, superficielles et pouvant être inconfortables ou dangereuses pour l'épiderme, les applicateurs

ST (Skin Tightening) bénéficient de la technologie non-ablative 3DEEP qui permet d'émettre une énergie contrôlée, qui chauffe jusqu'au derme profond en préservant la barrière épidermique et jonctionnelle.

L'élévation thermique (jusqu'à 52-55°C) est réalisée en focalisant l'énergie émise dans le derme afin d'obtenir un remodelage optimal du collagène sans douleur.

La technologie 3DEEP d'EndyMed contrôle en temps réel l'impédance cutanée de la zone de traitement et module continuellement les ondes RF émises afin de délivrer l'énergie optimale tout en préservant une sécurité maximale.

SPECIFICATIONS DU SYSTÈME

Fréquence de sortie
1MHz

Puissance consommée
220 W

Puissance d'entrée
220-240 V, 50-60 Hz, 1A

Interface utilisateur
Ecran LCD couleur tactile

Dimensions
115x30x19 cm

Poids
33 kg



Applicateurs disponibles avec le système EndyMed Pro



3DEEP
Vacuum
Contour



3DEEP
Large



3DEEP
Small



3DEEP
iFine



3DEEP
Shaper



3DEEP
Mini
Shaper



3DEEP
Fractional
Skin
Resurfacing



Intensif RF
Micro-
aiguilles

Puissance élevée et polyvalence – L'avantage de PURE

EndyMed PURE offre une flexibilité absolue grâce à ses différents applicateurs facilement interchangeables. La plateforme PURE peut être configurée avec uniquement les applicateurs nécessaires à votre activité et vos besoins afin d'offrir à vos patients les traitements les plus efficaces et demandés actuellement.

Endymed PURE est agréée par la FDA et la technologie 3DEEP RF est unique à EndyMed et brevetée.

Endymed PURE propose des traitements de haute qualité de resurfaçage fractionnel, de raffermissment et tonification de la peau du visage, du cou, du haut du corps ainsi que de remodelage corporel.

Tous réunis en une seule plateforme simple d'utilisation.

ENDYMED™ | PURE 2.0

ENDYMED™ | PURE+

NOUVEAU ! La nouvelle PURE 2.0 est désormais plus puissante (65 W RF) et accueille les applicateurs focalisés 3DEEP Shaper et Mini Shaper ainsi que l'applicateur Intensif RF avec les micro-aiguilles pénétrant jusqu'à 3,5 mm de profondeur.



Applicateurs disponibles avec le système EndyMed PURE



3DEEP
Large



3DEEP
Small



3DEEP
iFine



3DEEP
Shaper



3DEEP
Mini
Shaper



3DEEP
Fractional
Skin
Resurfacing



Intensif RF
Micro-
aiguilles

2.0

Réduction de la cellulite, réduction de la circonférence corporelle et remodelage corporel.

Remodeler et Tonifier



Contour

3DEEP

Vide contrôlé électroniquement

Combinaison de la technologie RF 3DEEP et du vide. Le vide pulsé permet de doubler le volume de tissu traité et chauffe jusqu'à 3 cm de profondeur.

Nouvelle fonction de massage modulée pour des traitements de réduction de la cellulite optimaux.

Dispositif le plus puissant sur le marché, jusqu'à 30% de plus d'énergie que ces concurrents.

Des commandes digitales de puissance et de vide très précises, situées sur la pièce à main, pour rendre le traitement plus confortable et plus précis.

Surveillance de la température cutanée et de l'impédance tissulaire en temps réel.

Des traitements totalement sûrs et sans douleur, confortables pour le patient et l'opérateur.

Spécialement développé avec une technologie innovante qui combine la RF et le vide pour obtenir le traitement le plus innovant pour la réduction de la cellulite et le remodelage corporel.

Résultats de traitement avec l'applicateur 3DEEP CONTOUR



Avant

Après

Avec la gracieuse permission de EndyMed Clinic, Caesarea, Israël



Avant

Après


Avec la gracieuse permission de Lilach Kaplan, Tel Aviv, Israël



Avant

Après


Avec la gracieuse permission de EndyMed Clinic, Caesarea, Israël

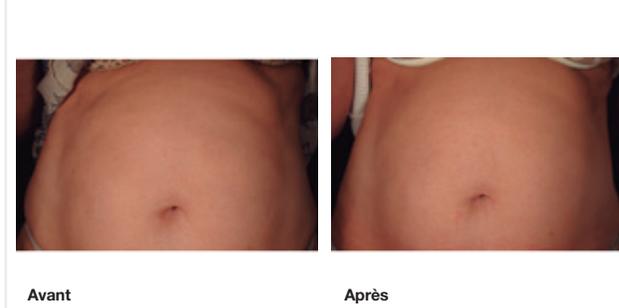

Avant

Après

Avec la gracieuse permission de Dr. Itzhak Vider, Hertzeliya, Israël

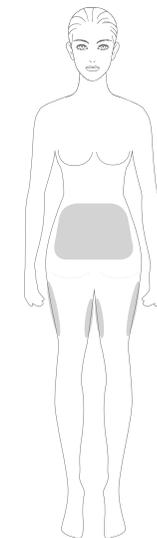

Abdomen
Cuisses
Fesses



Agrée par la FDA pour la réduction de la cellulite.

Traitement de la laxité de la peau,
Body contouring sur des grandes zones corporelles.

Remodeler et Tonifier



3DEEP Large

Radiofréquence
3DEEP

Conçue spécialement pour le traitement de la laxité, le body shaping et pour la réduction de circonférence sur des zones corporelles importantes.

Résultats de
traitement avec
l'applicateur
3DEEP LARGE



Avec la gracieuse permission de Dra. Fiona Wright, Texas, USA




Avec la gracieuse permission de Dr. Hugues Cartier, Arras, France



Avec la gracieuse permission de Dra. Josefina Royo, Madrid, Espagne



Avec la gracieuse permission de ENDYMED, Canada

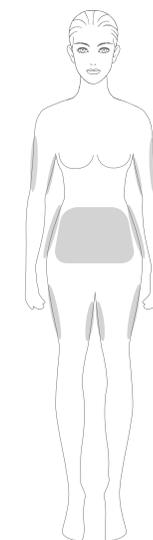

Abdomen
Hanches
Cuisses
Bras

Traitement de la laxité de la peau
sur des zones anatomiques plus petites

Remodeler et Tonifier



3DEEP Small

Radiofréquence
3DEEP

Conçue spécialement pour le traitement de la laxité cutané sur des zones anatomiques plus petites telles que le visage, le cou, les bras, les genoux ou encore la zone péri-ombilicale.

Résultats de
traitement avec
l'applicateur
3DEEP SMALL



Avec la gracieuse permission de Martine Baspeyras, Dermatologue, Bordeaux, France




Avec la gracieuse permission de I. Vider, Medical OR, Hertzlia, Israël



Avec la gracieuse permission de Dra. Fiona Wright, Texas, USA



Avec la gracieuse permission de I. Vider, M.D., Hertzlia, Israël

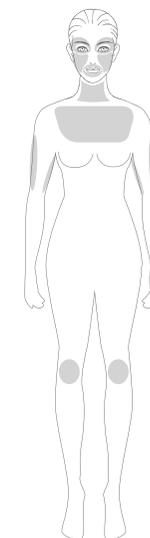

Visage
Cou
Décolleté
Bras
Genoux

Traitement des rides et du relâchement cutané
sur les zones péribuccales et péri-orbitales plus délicates.

Remodeler et Tonifier



3DEEP iFine

Radiofréquence
3DEEP

iFine fonctionne en chauffant progressivement les couches profondes de la peau, stimulant la néo-collagénèse responsable de la remise en tension de la peau et de l'atténuation des rides.

Lisse et tend la peau autour des yeux.

Réduit le relâchement de la paupière inférieure et améliore le contour des yeux.

Remise en tension de la paupière supérieure.

Offre un regard plus jeune et moins fatigué.

Assouplit les fines ridules.

Résultats de
traitement avec
l'applicateur
3DEEP iFINE




Avec la gracieuse permission de Isabelle Rousseaux, Dermatologue, Loos, France



Avec la gracieuse permission de Isabelle Rousseaux, Dermatologue, Loos, France



Avec la gracieuse permission de Isabelle Rousseaux, Dermatologue, Loos, France

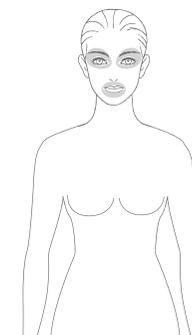

Zone Péri-orbitale

Zone Péri-orale

Traitement par Radiofréquence focalisée des grandes zones corporelles telles que l'abdomen, les fesses ou les cuisses.

RF Focalisée



3DEEP Shaper

Radiofréquence focalisée
3DEEP

La conception unique à six électrodes concentriques contrôlées simultanément permet une meilleure chauffe volumétrique de la zone de traitement et maximise l'efficacité de l'énergie appliquée pour des résultats incroyables sur la remise en tension de la peau laxé, l'amélioration de l'apparence de la cellulite et la réduction de la circonférence corporelle.

La géométrie concentrique des électrodes RF combinée au contrôle électronique de leur phase

d'émission 3DEEP focalise l'énergie en profondeur et diminue la perte d'énergie en surface.

Cette pénétration plus profonde et contrôlée de l'énergie raffermit la peau en stimulant le processus de renouvellement du collagène.

Le design unique de l'applicateur Shaper, avec une grande surface de traitement de 40,7 cm², favorise des traitements plus rapides et efficaces.

C'est la solution idéale pour les traitements des grandes zones du corps : relâchement cutané et réduction de la cellulite avec réduction de la circonférence sur l'abdomen, la taille, la zone péri-ombilicale, les fesses, les hanches et les cuisses.

Résultats de traitement avec l'applicateur 3DEEP SHAPER



Avec la gracieuse de Dra. Sharon Kshetry, USA




Avec la gracieuse de Dr. Thierry Leva, Dermatologue, Toulon, France



Avec la gracieuse de Isabelle Rousseaux, Dermatologue, Loos, France



Avec la gracieuse de Sam Robson, Dermatologue, UK

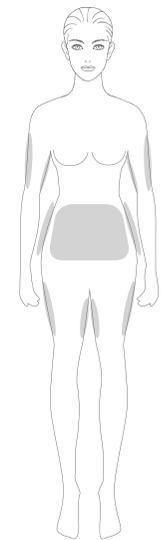

Abdomen
Hanches
Cuisses
Bras

Traitement par Radiofréquence focalisée des bas-joues,
du double menton des bras et des genoux.

RF Focalisée



3DEEP Mini Shaper

Radiofréquence focalisée
3DEEP

La pièce à main innovante Mini-Shaper à électrodes concentriques délivre une énergie focalisée avec la technologie 3DEEP dans les couches profondes du derme pour des résultats optimaux.

Le Mini-shaper atteint et maintient la température la plus haute possible au sein des tissus traités afin de maximiser le remodelage collagénique.

La combinaison de l'énergie focalisée 3DEEP RF avec le design d'émission concentrique permet de délivrer de façon sécuritaire quasiment **le double d'énergie comparativement** aux autres pièces à main RF de tailles similaires et de maintenir la chaleur au sein des tissus plus de temps après la fin du traitement.

Plus puissante, des traitements jusqu'à 50% moins longs !

Min-Shaper est la pièce à main la plus efficace disponible sur le marché pour les traitements des petites zones anatomiques telles que le double menton, le cou, les bras ou encore les genoux !


Résultats de
traitement avec
l'applicateur
3DEEP MINI
SHAPER



Avec la gracieuse de EndyMed Clinic, Caesarea, Israël



Avec la gracieuse de EndyMed Clinic, Caesarea, Israël

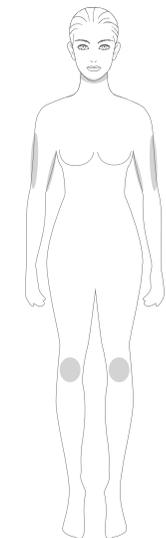

Menton
Bras
Genoux

Traitement de l'hyperpigmentation, de la texture de peau, des ridules et cicatrices sur le corps et le visage.

RF Fractionnée



3DEEP FSR

Resurfaçage fractionné avec 3DEEP RF

Durée du Pulse :
0,01 - 0,06 sec.

Energie totale RF :
Jusqu'à 62 mj/pin

Matrice d'embout :
112 spots par matrice

Dimension de l'embout :
10 x 15 mm

Nombre de pulses autorisés
par embout :
Jusqu'à 450 pulses

L'applicateur FSR avec ses 112 électrodes est la seule application qui permet, simultanément, une micro-ablation fractionnée de l'épiderme et le chauffage volumétrique de 100 % du derme traité.

Le résultat est une peau plus douce, plus lumineuse et moins pigmentée. L'effet ablatif a une action de relissage combinée à une chauffe RF volumérique profonde pour une raffermissant et anti-relâchement.

Spécialement conçu pour le rajeunissement cutané fractionné qui améliore la texture de la peau, la dyschromie et atténue les ridules et les cicatrices.


Résultats de traitement avec le 3DEEP FSR



Avec la gracieuse permission de Masaki Sato, Chirurgien plastique, Sendai, Japon



Avec la gracieuse permission de I. Vider, Hertzlia, Israël

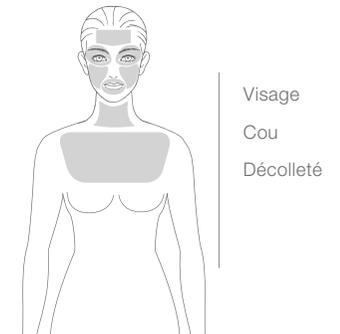

Avec la gracieuse permission de Yoram Harth, Dermatologue, Hertzlia, Israël



Avec la gracieuse permission de Dr. Malavika Kohli, Dermatologue, Inde

Action raffermissante, réduction des ridules, amélioration de la texture, réduction de l'acné inflammatoire et des cicatrices d'acné, révision des cicatrices, traitement des vergetures.

RF Fractionnée



Intensif

Durée de l'impulsion RF :
Jusqu'à 200 ms

Energie totale délivrée :
Jusqu'à 62 mj/pin

Matrice d'embout :
25 aiguilles non-isolées par embout stérile

Taille de l'embout :
10 x 10 mm

Nombre de pulses :
Jusqu'à 1000 tirs

La technologie la plus avancée de RF Intra-dermique

Mouvement exclusif d'insertion d'aiguille avec une pénétration rapide et contrôlée jusqu'à 5 mm (3,5mm PURE 2 .0)

Les aiguilles traitées Or sont non isolées et génèrent plus de chaleur pour un meilleur remodelage du collagène sur toute l'épaisseur du derme.

Moins de passages nécessaires par traitement pour des traitements courts et un plus grand confort du patient sans saignement ni œdème.


Temps de récupération rapide du traitement - plus rapide que n'importe quel autre appareil sur le marché.

Conçu pour traiter les cicatrices d'acné, les ridules profondes, les vergetures et autres imperfections qui exigent un chauffage dermique localisé et profond.


Résultats de traitement avec INTENSIF



Avec la gracieuse permission de Gregory S. Keller, Chirurgien plastique, USA

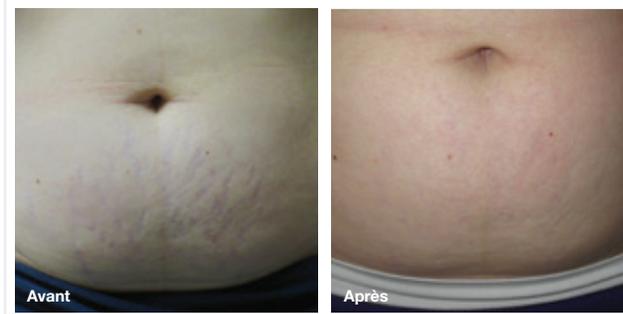


Avec la gracieuse permission de Daniel Barolet, Dermatologue, Canada

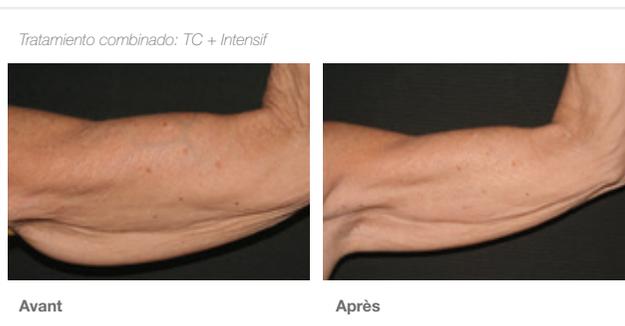

Avec la gracieuse permission de Dr. Francesco Paolo Alberico, Nápoles, Italie



Avec la gracieuse permission de Liliane Mouyal, M.D., Paris, France

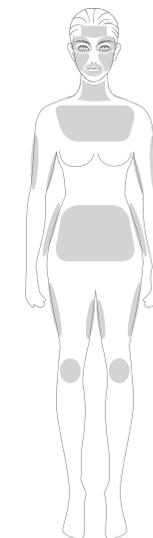

Visage
Corps



ZAC des Fossés Neufs
2, rue du Parc des Vergers
91250 TIGERY
Tél. : 01 69 89 32 47
email : contact@technilase.fr
www.technilase.fr

TECHNILASE PRODUITS ET SERVICES

Notre objectif est de mettre à la disposition des médecins et des patients les dernières technologies médicales de photothérapie, laser et appareils médicaux à base d'énergie dans le domaine de la médecine dermatologique esthétique.

Nous choisissons des appareils une fois qu'ils ont été testés et ont démontré des résultats exceptionnels. Pour ce faire, nous sommes constamment à l'écoute des industriels dans le paysage technologique médical international, et établissons des accords de distribution avec les fabricants et les marques qui peuvent prouver leurs résultats.

EXPÉRIENCE ET FIABILITÉ MAXIMALE DANS LE SERVICE TECHNIQUE

Le service après-vente est une part importante de notre ADN et constituait même notre activité exclusive lors de notre démarrage d'activité en 2004.

Ainsi TechniLase fournit le suivi technique de toutes les marques distribuées.

Parce que nous savons que votre confiance est primordiale, nous cherchons en permanence à fournir un service professionnel et à contenir le coût d'entretien de vos appareils tout en nous conformant aux préconisations de suivi et de maintenance demandées par chaque fabricant.

Nous investissons de façons conséquentes dans le stock des pièces détachées et la formation de nos techniciens à travers des formations régulières des fabricants ou internes sur chacun des appareils que nous distribuons.

Une qualification technique élevée combinée à près de 20 ans d'expérience et de connaissance approfondie des équipements distribués par TechniLase est aussi l'assurance que vous travaillez avec des professionnels.

MATÉRIEL MARKETING DE SUPPORT

Chez TechniLase, nous vous aidons dans vos campagnes de marketing avec de multiples matériaux de support :

- Affiche, poster salle d'attente
- Brochures d'information patient
- Support publicitaire
- Bannières pour les réseaux sociaux

Expérience de traitement incomparable

100% sûr • Traitements indolores et efficaces •
Pour tous les types de peaux • Résultats immédiats
et sur le long terme • Sans éviction sociale •
Traitements rapides • « Lunch time treatments »

EndyMed propose la technologie 3DEEP RF unique, agréé FDA qui offre des solutions esthétiques innovantes et efficaces pour le traitement non-invasif du relâchement cutané, du body shaping, du resurfacing de la peau et des traitements de remodelage dermique du visage et du corps avec la RadioFréquence Intradermique à micro-aiguilles.

ENDYMED[™]

3DEEP SKIN SCIENCE

www.EndyMed.com

ENDYMED[™] Medical Ltd., 12 Leshem St., POB 3582,
North Industrial Park, Caesarea 30889, Israel

TECHNILASE - Distributeur exclusif France, Belgique et Luxembourg :
ZAC des Fossés Neufs - 2, rue du Parc des Vergers - 91250 TIGERY - Tél. : 01 69 89 32 47 – email : contact@technilase.fr - www.technilase.fr